




マスク及びCPAP付属品の使い方

オプティライフ
OptiLife


- 本書は取扱説明書にかわる物ではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。
- フィルタの交換・取付はご使用の機器を確認し、裏面の「フィルタの取付方法」の項を参照しながら行って下さい。
- ご不明な点がございましたら、裏面のお客さまコールセンターまでお問合せ下さい。

マスク装着の手順 ※鏡で確認しながら装着しましょう

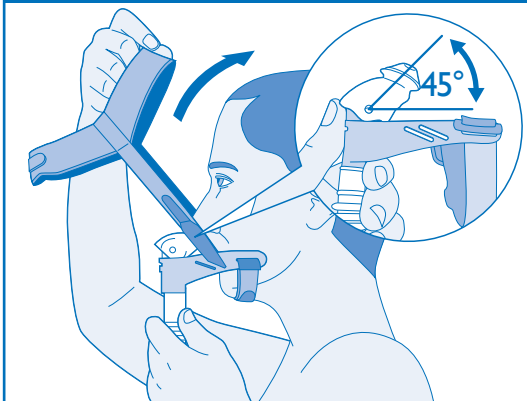


1

- ・ピロークッションの場合、まずピロークッションをフィットする角度に調整します。
(目安は約45度)
- ・次にクッションを鼻孔にあてたまま、ヘッドギアを前から後に装着します。

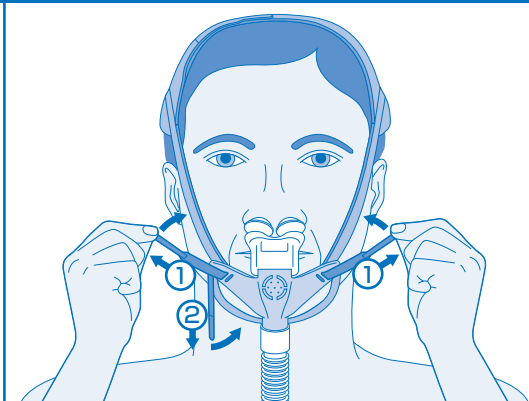

2

- ・①のマジックテープをはがし、左右均等に締めすぎないように注意しながら調整します。
- ・次にあごの下②のチンサポートバンドも調整します。

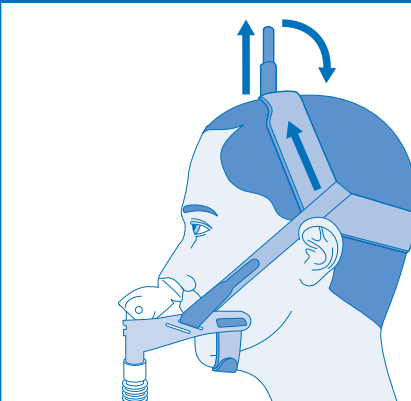

3

- ・頭頂部のヘッドギアを調整します。




クレードルクッションの場合は、垂直に取り付けます。

トラブルと対処法

鼻が圧迫されている場合


ピロークッションは鼻奥まで挿す必要はありません。

鼻孔にあてる程度に調整します。

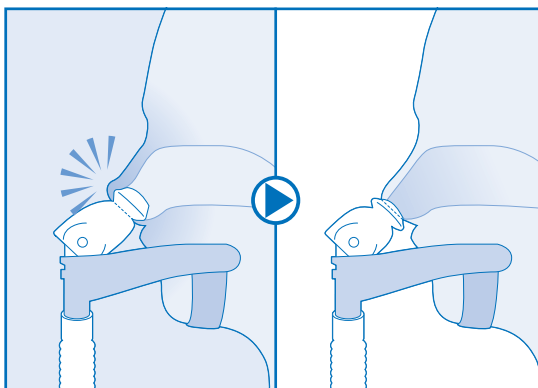


ヘッドギアの調整

図のようにヘッドギアの後部が上にある場合、マスクが外れる可能性があります。①のヘッドギアを下に引き、再度②のヘッドギアの調整をします。

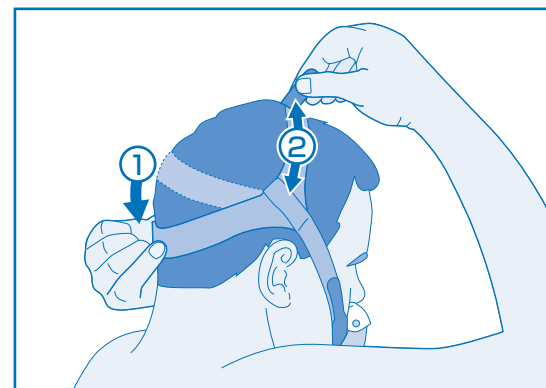


フィルタの取付方法

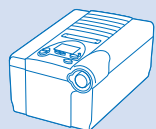



REMstar BiPAP AutoSV

機器背面にあるフィルタカバーの左右両端を押しながら引き抜き、フィルタを取り除きます。新しいものに交換する際は右図の順で入れて最後にフィルタカバーを取付けます。極微細フィルタ(別売品)を使用しない場合は花粉フィルタのみを交換します。

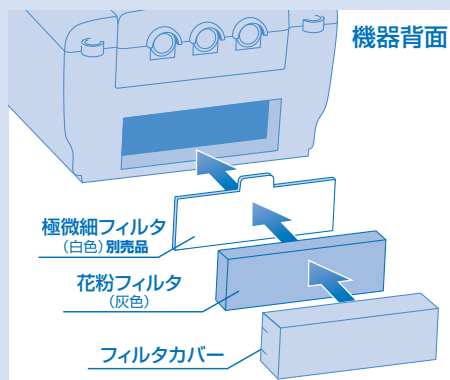


Mシリーズ

機器背面からフィルタを取り除きます。新しいものに交換する際は右図の順で入れます。極微細フィルタ(別売品)を使用しない場合は花粉フィルタのみを交換します。

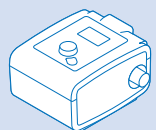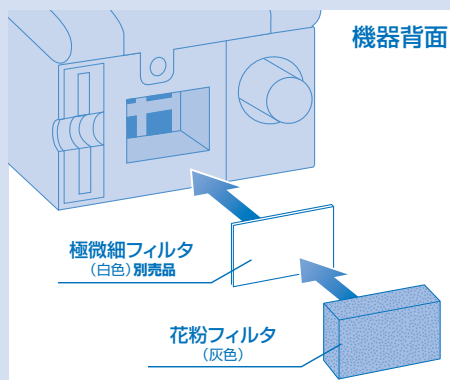

System Oneシリーズ

機器背面からフィルタを取り除きます。新しいものに交換する際は右図の順で入れます。極微細フィルタ(別売品)を使用しない場合は花粉フィルタのみを交換します。

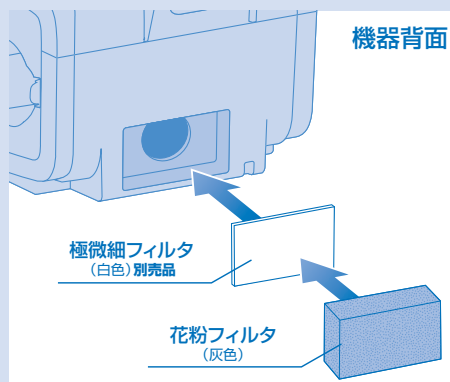


フィルタの交換・洗浄周期は右上の「付属品のお手入れ」の項を参照下さい

付属品のお手入れ

マスク・呼吸回路


▶ 毎日

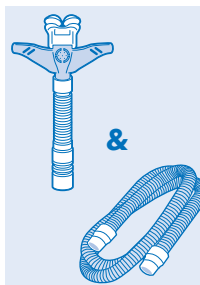

中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。

ヘッドギア


▶ 1週間

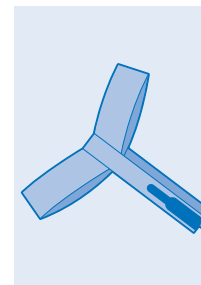

マスクからはずし中性洗剤をうすめたぬるま湯でもみ洗いします。洗たく機で洗う際は洗たく用ネットに入れます。

花粉フィルタ (灰色)


▶ 2週間

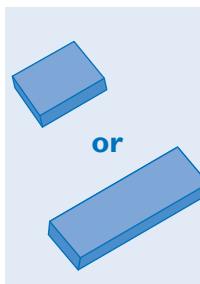

必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、よくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。

給水タンク・チェンバー

▶ 毎日

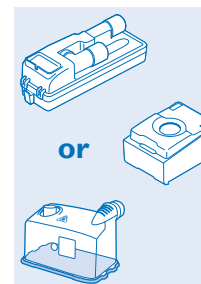

中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。



注意

付属品(マスク・回路など)をお手入れする際は、以下の事をお守り下さい。

- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当りの良い場所で干さない。

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

販売名: レムスター Mシリーズ

www.philips-respironics.jp

© 2011 Philips Respironics GK PN 1078650 110304 R2-S

販売名: オプティライフ ネーザルマスク

販売名: レムスターシリーズ

販売名: BiPAPハーモニー

販売名: レムスター Mシリーズ

販売名: レムスターAuto PRIシステム

医療機器届出番号: 11B1X00022000006

医療機器承認番号: 21400BZY00262000

医療機器承認番号: 21600BZY00394000

医療機器承認番号: 21800BZX10110000

医療機器承認番号: 22200BZX00874000

一般医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

お客さまコールセンター

☎ 0120-48-4159 (よるはよいこぎゅう)

受付時間: 平日9:00~17:00 土10:00~17:00 ※日・祝日休業

専用ホームページ <http://www.48-4159.com/>